



micro Nano Tray ®

www.micropolymerdental.com
info@micropolymerdental.com

Phone: (+39) 327 4572 561

Phone/Fax (+39) 0924 49 089

Rev.1 / 20-04-2018

Gracias por elegir

MicroNano®TRAY, el material para la bandeja de endurecimiento rápido.

Es un material práctico y dimensionalmente estable para bandejas individuales y bases de prótesis. Para asegurarnos de que siempre obtenga resultados confiables con este producto, le pedimos que lea estas instrucciones detenidamente.

Indicaciones:

- ÿ Realización de cucharas individuales
- - Realización de bases individuales para prótesis y valles de cera.
- - Montaje y colocación de dientes en las bases de la prótesis realizada.

Informazioni tecniche:

mezcla Polvo / Líquido	20:4.5
Tiempos de mezcla.	15 s*
Fase de transición opaca.	45 s*
Fase plástica.	4 min*
Autopolimerización después de mezclar	7-8 min*

* Los tiempos de procesamiento proporcionados se refieren a un material y temperatura ambiente de 23 ° C [73.5 ° F]. Las temperaturas más altas se acortan, las temperaturas más bajas alargan estos tiempos de procesamiento

MicroNano® TRAY es muy fácil de administrar. El material endurecido es dimensionalmente estable, fácil de terminar y no se mancha durante el lijado o pulido, reduce la contracción gracias a la nanotecnología para la base de la dentadura y las cucharas de alta precisión..

Material / Propósito:

Materiales de la cuchara, polvo de metacrilato de metilo autopolimerizable y líquido. Clasificación según MDD 93/42 / EEC anexo VII Clase I para medios dentales auxiliares con uso intraoral a corto plazo.

Caratteristiche del prodotto:

- Masa fácil y modelado
- ÿ Fase de expansión corta
- No se pega en fase el plástico
- estabilidad dimensional
- Acabado fácil
- No se contrae en el modelo.

Relación de mezcla 20: 4 - 4.5

Suggestito un rapporto di miscelazione polvere/ liquido
20g polvere : 4,5g di liquido

Preparación:

Después de bloquear los socavados, sumerja el modelo de yeso y aplique con dos capas delgadas de aislamiento a base de alginato en la superficie. MicroSol Plus siempre muestra resultados confiables.

Importante: el aislamiento debe estar bien seco para asegurarse de que no haya marcas blancas o manchas en el acrílico terminado. Para crear más espacio para el material de impresión, el modelo también se puede aislar / recubrir con cera.

Mezcla:

Ponga la cantidad requerida de líquido en el vaso, luego agregue la cantidad correspondiente de polvo. Mezcle bien durante unos 15 segundos. Después de otros 30 segundos, el material se puede moldear a mano..

Atención: al modelar el material a mano, se recomienda usar guantes protectores de goma de butilo sin polvo..

Proceso de trabajo:

Modele el material sobre el yeso en la forma deseada. Modele un exceso de corte con una herramienta adecuada. Puede usar el exceso para formar los mangos de la bandeja. Hay al menos 3 minutos disponibles para el proceso de modelado, por lo que el material comienza a endurecerse y endurecerse. Levanta cuidadosamente la forma del modelo de yeso. Ahora puede moler y pulir la forma en la forma deseada. Posteriormente, la bandeja de impresión debe limpiarse cuidadosamente para eliminar el polvo abrasivo residual.

Según sea necesario, el asa de la bandeja se puede conectar más adelante en la parte posterior del módulo.

polimerizar:

Después de unos 7-8 minutos, el material se endurece automáticamente a temperatura ambiente..

Después de la finalización:

Antes de usar el material, debe garantizarse su estabilidad suficiente.


Medidas de conservación y seguridad.:

El material no debe usarse después de la fecha de vencimiento. La temperatura de almacenamiento no debe exceder los 25 ° C [77 ° F] Evite la luz solar directa. Mantenga los envases cerrados después del uso y fuera del alcance de los niños. El monómero es altamente inflamable, irrita las vías respiratorias y la piel. La sensibilización puede ocurrir después del contacto con la piel. Almacene los contenedores en un lugar bien ventilado. Evite el contacto con los ojos y la piel. No inhalar los vapores. Mantener alejado de llamas y chispas. No fumar. No permita que el líquido ingrese a los desagües. Los envases vacíos se pueden reciclar de acuerdo con las regulaciones locales de reciclaje..

Colores disponibles del producto.:

MicroNano® TRAY está disponible en los siguientes colores:

Amarillo opaco - Rosa opaco

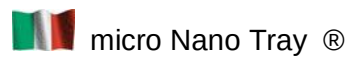

www.micropolymerdental.com
info@micropolymerdental.com

Phone: (+39) 327 4572 561
20-04-2018

Phone/Fax (+39) 0924 49 089

Rev.1 /